

**Bipolare Pinzette mit Spülung  
und Luer-Lock Anschluss**  
**Bipolar forceps with irrigation  
and Luer-Lock connector**




**Bipolare Pinzetten mit Spülung**  
**Bipolar forceps with irrigation**

**Bipolare Pinzetten mit Spülung**  
**Bipolar forceps with irrigation**

**Duckbill mit Spülung** **NEW**  
**Duckbill with irrigation**

**Bajonett mit Doppel-Spülung**  
**Bayonet with double irrigation**

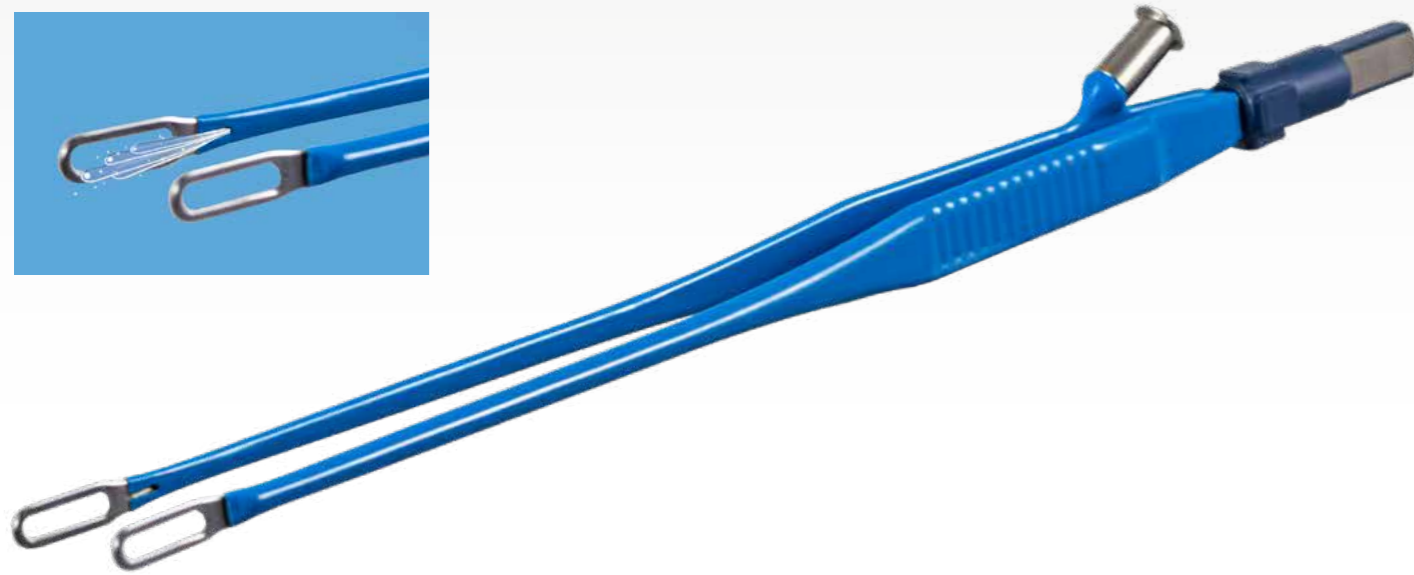

Pinzetten mit integrierter Spülung sind besonders geeignet zur Koagulation von Gewebe, bei dem es zu starkem Verkleben mit der Pinzette Spitze kommen kann (z. B. bei Lebergewebe oder in der Neurochirurgie). Die NaCl-Spüllösung führt zu verbessertem elektrischem Kontakt und reduziert damit das Anhaften des Gewebes und die Notwendigkeit der intraoperativen Reinigung des Instruments.

Forceps with integrated irrigation are particularly suitable for coagulation of tissue that may stick strongly to the forceps tip (e.g. liver tissue or in neurosurgery). The NaCl rinsing solution leads to improved electrical contact and thus reduces tissue adhesion and the need for intraoperative cleaning of the instrument.

Die speziellen, beidseitig gespülten Pinzetten mit Luer-Lock Anschluss ermöglichen ein noch gezielteres, gleichzeitiges und damit wirkungsvolleres Spülen beider Pinzettenspitzen bei besonders kritischen Anwendungen.

The special, two-sided irrigated forceps with Luer-Lock connector allow for an even more targeted, simultaneous and thus more effective irrigation of both forceps tips for particularly critical applications.



**Schlauchset**  
**Tubing set**  
 Set de tuyau  
**Conjunto de manguera**  
 Set manichetta

90020100  

STERILE EO

Spitzenbreite  
**Width of tips**  
 Largeur des pointes  
**Anchura de puntas**  
 Larghezza delle punte

Anschluß  
**Plug**  
 Connecteur  
**Enchufe**  
 Collegamento



200 mm

220 mm

81122300

81122305

Spitzenbreite  
**Width of tips**  
 Largeur des pointes  
**Anchura de puntas**  
 Larghezza delle punte

Anschluß  
**Plug**  
 Connecteur  
**Enchufe**  
 Collegamento



220 mm

1,0 mm x 8 mm

81522352

1,5 mm x 8 mm

81522351



**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**

Bipolare und monopolare Instrumente  
Zubehör für die Elektrochirurgie  
Chirurgische Instrumente  
Entwicklung von Instrumenten auf  
Kundenwunsch  
Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**

Bipolar and monopolar instruments  
Accessories for electrosurgery  
Surgical instruments  
Design and development of instruments  
to customer specifications  
Service and repair

CE 0297

**Günter Bissinger**

**Medizintechnik GmbH**

Hans-Theisen-Str.1  
79331 Teningen/Germany

T +49 7641 9 14 33 0

F +49 7641 9 14 33 33

info@bissinger.com

www.bissinger.com